



薬暦パッケン専用ラベル印字ソフトウェア

取扱説明書

本紙では、薬暦パッケン専用ラベル印字ソフトウェアのインストール手順と使用方法について説明しています。よくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いします。

インストールの前に

薬暦パッケンをインストールする前に、下記の手順に沿ってご利用環境の確認を行ってください。

- ① Windowsボタンを押し、スタートメニューから設定を開きます。



- ② システムをクリックします。



- ③ 詳細設定をクリックし、システムの種類を確認してください。



- ④ 当ソフトウェアは64BitのWindowsにのみ対応しております。
32Bitの場合にはお問い合わせください

インストーラーのダウンロード

- ① 下記、弊社Webサイトへアクセスします。

<http://yakushin-net.co.jp>

- ② トップページ下部の「薬暦パッケン専用ラベル印字ソフトウェアダウンロードページ」のバナーをクリックします。




- ③ フォームに必要事項を記入し、確認をクリックしてください。登録したメールアドレスにダウンロード用のURLが配信されます。

- ⑤ 保存先を選択し、[保存] ボタンをクリックします。

- ⑥ ファイルをダウンロードし解凍します。

インストール手順

- ① [setup.exe] をダブルクリックすると、セットアップウィザードが開きますので、[次へ] をクリックしてください。
- ② インストールフォルダの選択画面が表示されますので、フォルダ欄に [C:\¥Program Files¥Yakushin¥YakurekiPakkun¥] が入力されているのを確認してください。

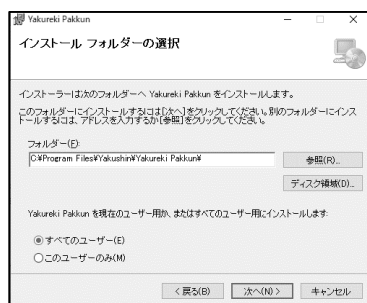

- ③ [すべてのユーザー] が選択されていることを確認してください。[このユーザーのみ] になっている場合は、[すべてのユーザー] を選択してください。
- ④ [次へ] をクリックするとインストールの確認画面が表示されます。再度 [次へ] をクリックするとインストールが始まります。
- ⑤ インストールが完了するとデスクトップに [PakkunTool] というアイコンが作成されソフトウェアの使用が可能になります。

ラベル印字の手順

- ① アイコンをダブルクリックし、ソフトウェアを起動します。起動をするとログイン画面が開きますので、ユーザー名、パスワードを入力しログインしてください。
[初期設定]
ユーザー名：1
パスワード：1
 - ② [新規] ボタンをクリックします。クリックすると別ウィンドウが開きます。
 - ③ 名前欄に薬暦パッケンを使用される方の名前を記入します。
ヘッダー印字なしにチェックを入れると、ヘッダー部分の名前の記載がキャンセルされます。また、印字なしにチェックを入れると、各ラベルへ名前の印字がキャンセルされます。
-
- ④ 開始日を選択します。印字無しにチェックを入れると各ラベルへの日付の印字がキャンセルされます。
 - ⑤ 1日の服用回数と日数を選択します。服用回数は1回～4回までを選択することができます。

- ⑥ 服用時点を選択します。選択された時点は青くなります。
朝昼夕を選択した場合、選択ボックスより「食前」「食直前」「食直後」「食後」「食間」を選択してください。
- ⑦ 各時点の表示色を変更する場合は「色」をクリックし変更を行ってください。
- ⑧ 保存をクリックします。ウィンドウが自動で閉じ、作成履歴画面に追加されます



- ⑨ リストから印字したい内容を選択し、[編集] ボタンを押します。
- ⑩ 編集画面が開きますので、印字内容を確認してください。
印字したくない項目は [印字無し] にチェックを入れることで印字されなくなります。
- ⑪ [プレビュー] をクリックすると、プレビュー画面が表示されます。印字内容を確認し、[右クリック] → [印刷] を選択し、ラベルを印刷してください。